
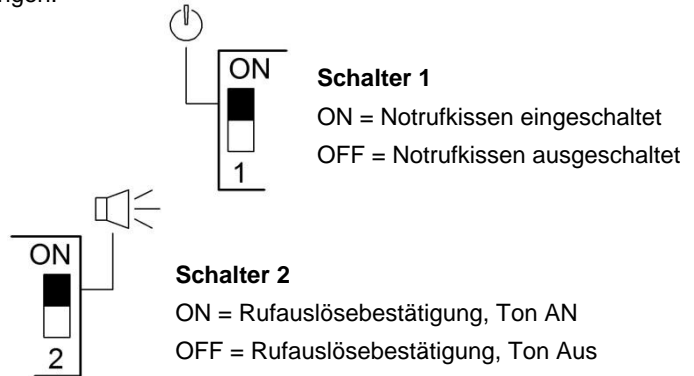



1. Notrufkissen einschalten

Öffnen Sie den Reißverschluss, um an die Schalter zu gelangen.

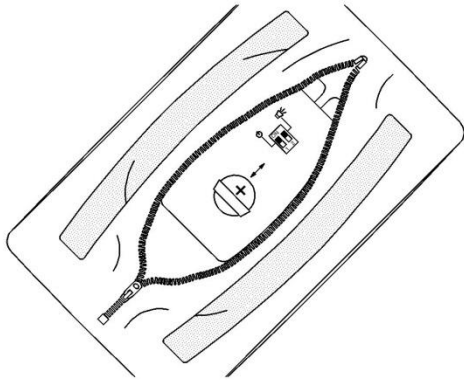

2. Notrufkissen positionieren

Anbringung mit Klettband z.B. am Bettgitter oder über selbstklebende Klettunkte auf glatten Flächen.

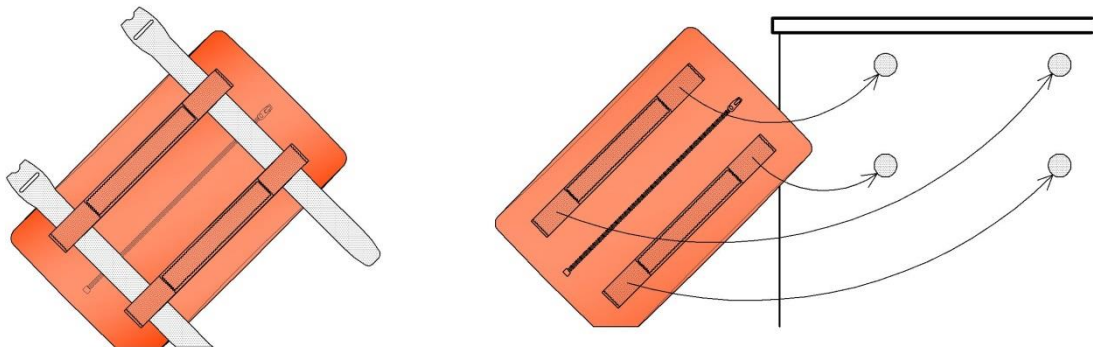

3. Notrufkissen am Empfänger einlernen

Um das Notrufkissen einzulernen muss ein Ruf ausgelöst werden.



Der Empfänger muss sich im Einlernmodus befinden.
Die genaue Beschreibung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Empfänger-Bedienungsanleitung



Diese Anleitung gibt in Kurzform Auskunft zur Inbetriebnahme und Gebrauch des Notrufkissens. Sie ersetzt nicht das Durchlesen der vollständigen Bedienungsanleitung!