

BEDIENUNGSANLEITUNG

AAL Profiline Notrufempfänger Mobil



Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasiertes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen.

Lieferumfang

Produkt	Bestellnummer ¹	Frequenz ¹
AAL Profiline Notrufempfänger Mobil incl. Steckernetzteil USB und Verlängerungskabel USB 1 m	HC-502	869,23 MHz
Bedienungsanleitung	HC-502-BA	

¹Bestellnummer und Frequenz befinden sich auf dem Typenschild.

Typ: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Hinweis: In dieser Beschreibung wird der AAL Profiline Notrufempfänger Mobil abgekürzt als „Notrufempfänger“ bezeichnet.

Bild 1: Notrufempfänger


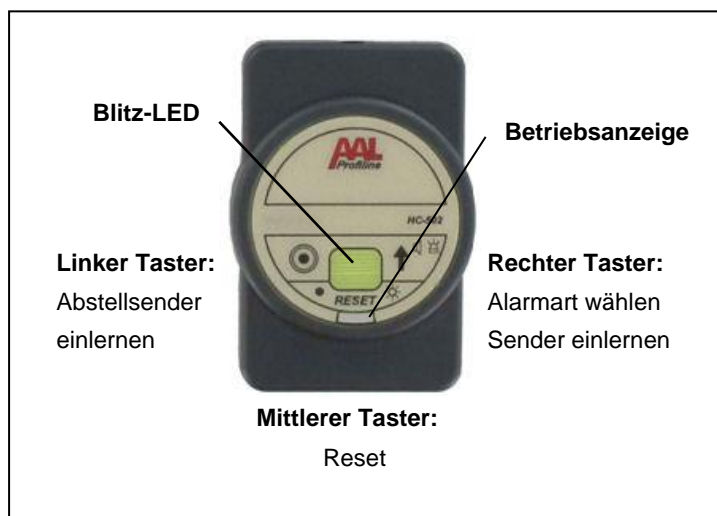


Bild 2: Beispiel Auswahl kompatibler Funk-Sender...

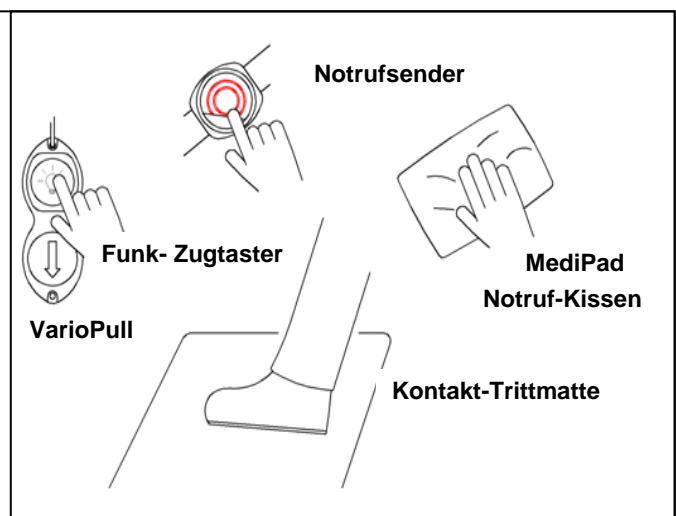

Inbetriebnahme:

Einlernen / Ablernen von Funksendern am Notrufempfänger

Das zu Erstinbetriebnahme erforderliche „Einlernen“ ist in Bild 3 und eventuelle „Ablernen“ ist in Bild 6 beschrieben.

Sichere Reichweite der Funkverbindung prüfen

Die Funkreichweite der zugehörigen AAL Profiline Sender entspricht den Anforderungen der technischen Prüfstelle der Krankenkassen. Innerhalb von Gebäuden kann mit ca. 30 m Reichweite gerechnet werden. Die Reichweite hängt wesentlich von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten ab.

Vor erstmaliger Verwendung sollte die störungsfreie Funkverbindung geprüft werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle in der näheren Umgebung befindlichen elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte wie Fernseher, Spielekonsolen und Computer **ein**.
2. Prüfen Sie die Funkmeldung zum Notrufempfänger in ca. 5–10 m Zusatzabstand gegenüber dem vorgesehenen Gebrauchsabstand. Achten Sie darauf, dass die Meldung mit einem einzigen Funksignal ausgelöst wird.

„Batterie schwach“- Meldung

Bei jeder Rufauslösung wird auch der Batteriezustand des Senders übertragen. Erfolgt eine „Batterie schwach“-Meldung ist im Sender innerhalb der nächsten Wochen die Batterie zu wechseln. Diese Meldung wird durch eine gelb blinkende LED mitgeteilt. Durch drücken einer beliebigen Taste wird die Meldung zurückgesetzt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

AAL Profiline Notrufempfänger Mobil



Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. DIN/EN 13727. Auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

Regelmässige Massnahmen



Vorsicht

Die regelmässigen Überprüfungen sorgfältig durchführen. Verschlossene / beschädigte Teile sofort austauschen. Bei Beschädigung oder Funktionsmangel das System bis zur Reparatur nicht mehr verwenden. Ein Öffnen des Gerätes ist nicht zulässig.

Maßnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung mit Prüfruf-Auslösung unter Beobachtung der Signal-LED Meldung.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	869,23 (sichere Sozialalarm Frequenz)
Versorgungsspannung:	5 V DC über USB-Anschluss
Anzeigen:	Signal- und Blitz-LED für Alarm Ruf- und Batteriemeldung, interner akustischer Alarmgeber
Batterie-Überwachung:	„Batterie schwach“ Erkennung
Abmessungen:	66 x 46 x 18 mm (BxHxT)
Gewicht:	Ca. 50 g (ohne Netzteil)
Schutzart:	IP 20
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

Bild 3: Sender einlernen¹

Rechte Taste ca. 3 Sekunden drücken
Grüne LED blinkt

zugehörigen Sender betätigen (z. B. Handsender)

Vorgang wird durch ein akustisches Signal bestätigt

rechte Taste kurz drücken, um das Programm zu verlassen

¹bei Bedarf können Sie auch einen **Abstell-Sender** einlernen. Gehen Sie dazu vor wie oben beschrieben, benutzen aber die **linke** Taste zum Einlernen. Die LED **orange** blinkt. Zum Verlassen des Programms drücken sie kurz die **linke** Taste.

Bild 4: Signalart einstellen

Rechte Taste kurz drücken

Durch mehrmaliges drücken auf die rechte Taste können Sie eine der **drei** Alarmvarianten bestimmen.

Betriebsanzeige LED leuchtet:

- Blitzleuchte und Signalgeber (Intervall wie bei "nur Signalgeber") → **Grün**
- nur Signalgeber = 1 Minute Intervall, dann jede Minute 1x kurz → **Orange**
- nur Blitzleuchte → **Rot**

Bild 5: Abstellen eines Rufes


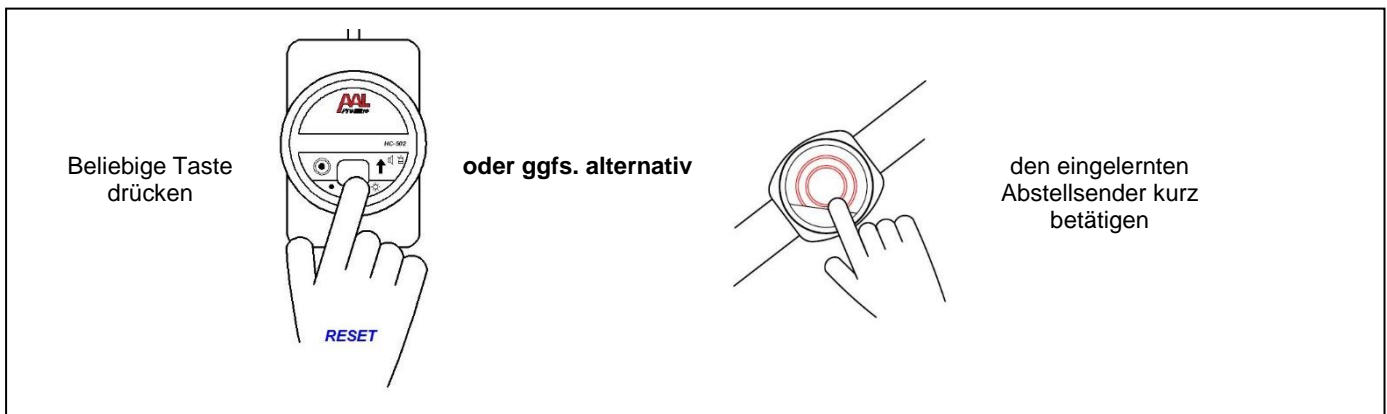


Bild 6: Alle eingelernten Sender löschen und die Einstellungen zurücksetzen auf Werkseinstellung

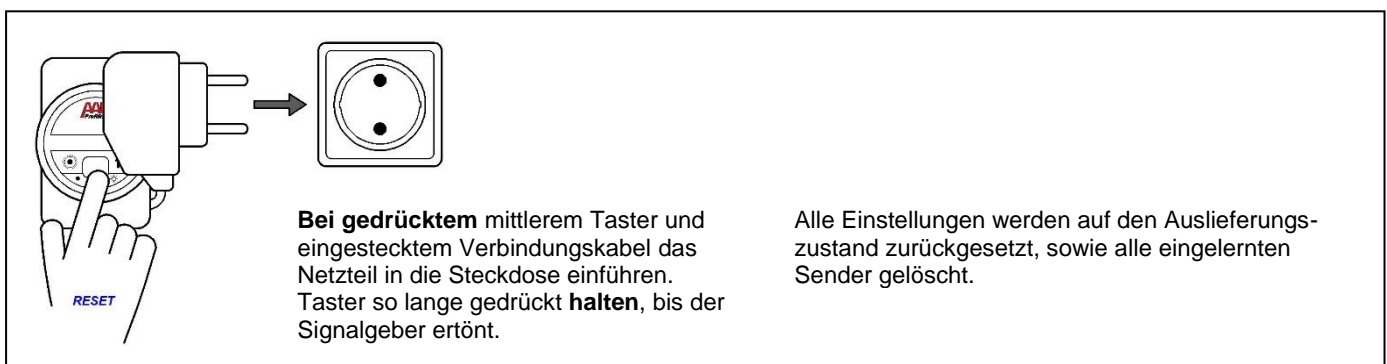

Ausschalten der Betriebsanzeige

Wenn (z.B. nachts) das Licht der Betriebsanzeige stört, können Sie durch jeweils ca. 5 Sekunden langes Drücken der Reset-Taste die grüne LED Betriebs-Anzeige wechselseitig AUS- oder EIN-schalten.

Störungsanzeigen

Im Falle einer Systemstörung **blinkt** die Betriebsanzeige LED in **rot-grüner** Folge.

Handelt es sich um eine Frequenzbandbelegung durch ein fremdes Funkgerät, **blinkt** die Betriebsanzeige LED **rot**.

Bei einer „Batterie schwach“ Meldung des Senders blinkt die LED **orange-roter** Folge.

Die Abstellung der Meldungen erfolgt durch drücken einer beliebigen Taste.

BEDIENUNGSANLEITUNG

AAL Profiline Notrufempfänger Mobil



Gewährleistung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff oder unsachgemäßer Behandlung. Sie gilt nicht für Verschleiss beweglicher oder Wechselteile.

Serviceadresse

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten, oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die folgende Adresse:

AAL-Homecare Deutschland - Wahner -Str. 45 - 53859 Niederkassel - Homepage: www.aal.support

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt AAL Homecare, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.aal-homecare.com.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.